

DistaMed
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS MÉDICALES

Concentrateur d'oxygène portable
Longfian JAY-1000P



Description de Produit

Longfian JAY-1000P portable concentrateur avec débit d'impulsion

Adsorption modulée en pression (PSA) est une technologie utilisée pour séparer certaines espèces de gaz d'un mélange de gaz sous pression en fonction de l'espèce" caractéristiques moléculaires et une affinité pour un matériau adsorbant. Il fonctionne à près de la température ambiante et diffère sensiblement de la distillation cryogénique des techniques de séparation des gaz. Matériaux d'adsorption spécifique (p. ex., les zéolites, charbon activé, tamis moléculaires, etc.) sont utilisés comme un piège, de préférence adsorption de la cible d'espèces de gaz à haute pression. Le processus puis balançoires à basse pression à l'desorb adsorbé matériau.

Ce qui est une impulsion débit concentrateur d'oxygène portable ?

Concentrateur d'oxygène portable sont les appareils à piles qui fournissent de l'oxygène supplémentaire aux personnes qui nécessitent une plus grande concentration d'oxygène que les niveaux de l'air ambiant, de concentrateurs d'oxygène attirer l'oxygène de votre environnement immédiat, il signifie qu'ils ne nécessitent pas de cartouches rechargeables d'oxygène ou de réservoirs qui rend la maintenance et entretien facile.

Fonctionnalités :

1. Mini taille et poids léger à seulement 1,98 kg
2. Facile à retirer la batterie externe
3. Avec un sac à bandoulière solide et confortable
4. Offre 24/7 d'oxygène ininterrompu
5. Avec batterie rechargeable jusqu'à 5,5 heures

Portable Oxygen Concentrator

1-5 Pulse Dose Settings



French CECA molecular sieve



High purity



Portable



Long-life 8 cell battery



Easy operation



PRODUCT DESCRIPTION



PRODUCT DESCRIPTION

Product Name	Portable Oxygen Concentrator
Oxygen Flow Rate	Five Pulse Dose Settings
Oxygen Concentration	93%±3%
Battery Duration	1.5-5.5 Hours
Charge Time	2 Hours
Net Weight	1.98Kg
AC Power	100-240V
Size	183Lx86Wx199H(mm)
Operating Altitude	Within 4000M


HOST DIAGRAM

Easy-to-use and read LCD screen
Simple operation, the elderly can use it easily



STABLE INVERTER COMPRESSOR

The core parts are imported from France.
Frequency conversion technology to ensure stable and sufficient oxygen output.

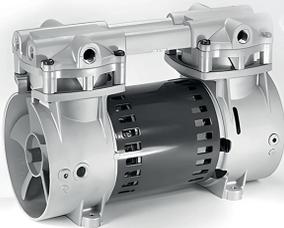

MODULE INSIDE ALL-IN-ONE DESIGN

LONGER LIFESPAN



Small Portable

Compact and easier to carry

Only 1.98KG

Including battery



Longer duration time of battery
is up to 5.5 hours



INTIMATE DESIGN CRAFTED BY HEART



DistaMed

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS MÉDICALES



Siège 28 Rue du Languedoc, Quartier
des hôpitaux, 20360 Casablanca Maroc

Téléphone 0522 20 49 69 0520 16 97 77
0522 29 46 15 0520 16 97 78

Email contact@distamed.ma