

LÖWENSTEIN
medical

JOYCEone

Votre premier choix : gain de temps et précision.

 With people in mind

JOYCEone

Made for you.



L'ajustement compliqué, c'est du passé. Avec JOYCEone, nous vous proposons aujourd'hui le masque de ventilation taille unique qui convient presque toujours. Il est le résultat de nombreux tests effectués sur patients de toutes origines et est disponible en nasal et bucco-nasal.

Confort et observance du patient optimisés

Le dispositif à ressort très flexible de la cale frontale s'ajuste automatiquement de sorte qu'elle repose toujours sur le front de manière stable et confortable à la bonne distance pour un traitement optimal. De plus, grâce à sa forme optimisée, la simple jupe du masque trouve automatiquement la position idéale – indépendamment de la taille du nez ou du visage.

Les avantages de JOYCEone


- Gain de temps : taille unique de la jupe du masque **1** et ajustement automatique de la cale frontale **2**
- Assemblage sans aucune confusion possible : code couleur du harnais et des attaches **4**
- Économique : une taille qui convient à presque tous les patients
- Pratique : facile à nettoyer
- Agréable : fuite intentionnelle silencieuse **3**
- Solide : matériaux extrêmement résistants

Bien pensé jusqu'au moindre détail

Vos patients aimeront JOYCEone dès le premier contact. En plus du confort et de la précision d'ajustement, plus aucune confusion n'est possible : le code couleur du harnais et des attaches à clips aide le patient à assembler et désassembler JOYCEone facilement et sans erreur.

Gain de temps sans compromis

En résumé : le concept astucieux de JOYCEone vous fait économiser un temps précieux tout en maintenant une qualité optimale des soins prodigués au patient.

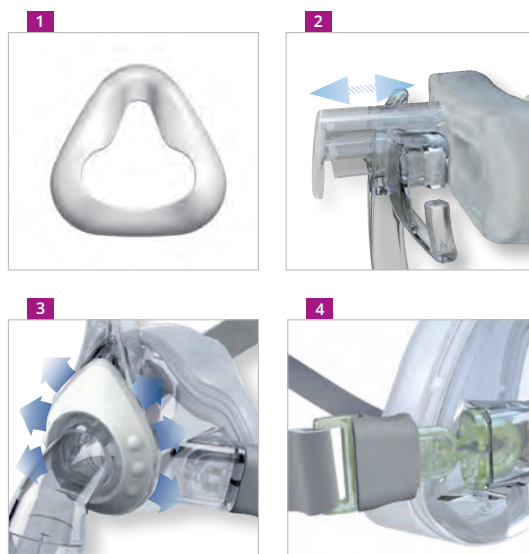

JOYCEone

Ergonomie du masque pour différentes tailles de nez



JOYCEone Full Face

Ergonomie du masque pour différentes tailles de nez et de visage



Pièces de rechange/accessoires

Harnais JOYCEone nasal kit attaches compris WM 25255		Jupe du masque JOYCEone nasal en silicone WM 25253		Kit raccord coudé V JOYCEone anneau de sécurité, raccord coudé, douille rotative, obturateur WM 15908	
JOYCEone Full Face kit attaches compris WM 25277		JOYCEone Full Face en silicone WM 25293		JOYCEone Full Face anneau de sécurité, raccord coudé, valve d'expiration d'urgence, douille rotative, obturateur WM 15944	
XL Harnais sans attaches compris WM 25338		Kit raccord coudé NV JOYCEone Full Face NV Anneau de sécurité NV, raccord coudé NV WM 25275		Sangle d'ouverture rapide JOYCEone Full Face Déverrouillage rapide WM 26890	
Coussinet frontal en silicone WM 26801		Kit adaptateur endoscopique JOYCEone Full Face NV anneau de sécurité NV, raccord coudé endoscopique NV WM 15864			

Toutes nos solutions thérapeutiques, nos accessoires et nos masques sous loewensteinmedical.com

Caractéristiques techniques

	JOYCEone	JOYCEone Full Face	JOYCEone Full Face NV		JOYCEone	JOYCEone Full Face	JOYCEone Full Face NV
Classe d'appareil selon la directive 93/42/CEE	II a			Résistance d'écoulement de la valve	-	0.8 hPa ±0.1 hPa	-
Dimensions (L x H x P)	ca. 96 x 115 x 83 mm	ca. 89 x 155 x 97 mm		• Inspiration à 50 l/min:	-	0.6 hPa ±0.1 hPa	-
Poids	87 g	127 g	127 g	• Exhalation à 50 l/min:	-	-	-
Plage de pression thérapeutique	4 à 30 hPa			Pression de commutation Valve d'expiration d'urgence	-	≤ 1,0 hPa	-
Volume d'espace mort	90 ml	240 ml		• Ouverture :	-	< 4,0 hPa	-
Raccord circuit patient (raccord conique selon EN ISO 5356-1)	Ø 22 mm (mâle)		Ø 22 mm (femelle)	Déclaration des valeurs d'émission sonore selon ISO 4871	19 dB(A)		
Températures limites	+5 °C à +40 °C			• pression acoustique :	27 dB(A)		
• en fonctionnement :	-20 °C à +70 °C			• puissance acoustique :	3 dB(A)		
• stockage :				• facteur d'incertitude :			
Résistance à l'écoulement	0.2 hPa ±0.1 hPa	0.3 hPa ±0.1 hPa	0.03 hPa ±0.1 hPa	Durée d'utilisation	jusqu'à 12 mois ¹		
• à 50 l/min	0.9 hPa ±0.1 hPa	0.7 hPa ±0.1 hPa	0.11 hPa ±0.1 hPa	Durée de vie	5 ans		
• à 100 l/min				Normes appliquées	EN ISO 17510:2020		

¹ Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques ont tendance à s'user plus rapidement s'ils sont nettoyés avec des détergents agressifs. Il est donc parfois nécessaire de changer certaines pièces avant la date indiquée.

Désignation

Référence

JOYCEone	WM 25260
JOYCEone Full Face	WM 25290
JOYCEone Full Face NV	WM 25270

Mentions légales :

Indications : Masque destiné à acheminer le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) de façon non invasive pour le traitement de l'apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à domicile ou par plusieurs patients en milieu hospitalier.

Classe du dispositif médical : IIa

Organisme notificateur : TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg-Germany

Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif

Remboursement : Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr

Fabricant : Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG - Allemagne

Distributeur : Löwenstein Médical France

Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.

CE 0197

© Protégé par le droit d'auteur. Toute forme de reproduction est soumise à l'autorisation expresse préalable de Löwenstein Medical. Pour des raisons techniques d'impression, toutes les indications sont fournies sans garantie.



Made in Germany

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Allemagne

Maison mère
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
loewensteinmedical.com

Ventes + Service
Löwenstein Medical Schweiz
Seestrasse 14b
5432 Neuenhof, Suisse
T. +41 (0)56 4 16 41 26
F. +41 (0)56 4 16 41 21
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.com

Ventes + Service
Löwenstein Medical France
6, Rue de l'Aulnay-Dracourt
91300 Massy, France
T. +33 (0)1 69 35 53 20
france@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



With people in mind